


K2 MyStains

Colores y estructura

Tintes K2 MyStains




Estructura K2 MyStains

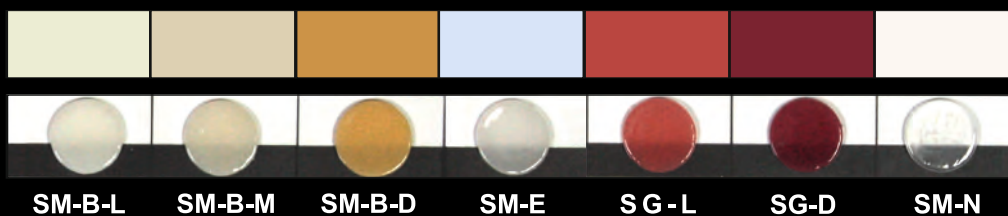


K2 MyStains Glaseado en polvo




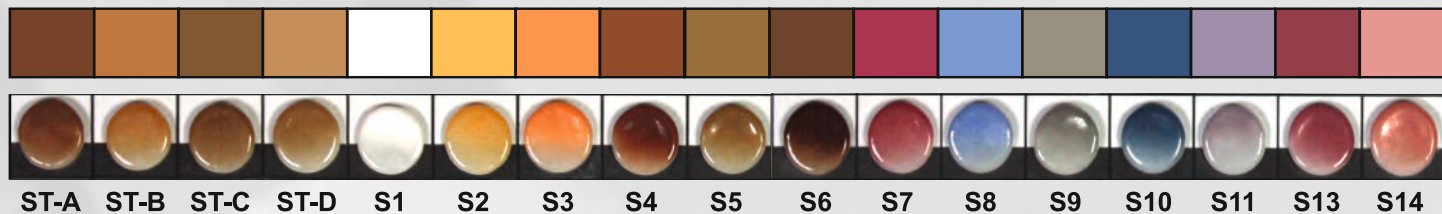


K2 MyStain Tintes + K2 MyStain Estructura



1. primera coloración

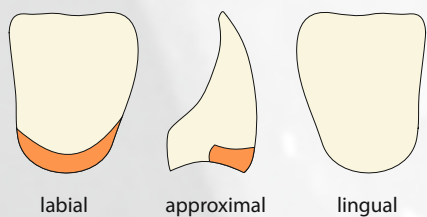



Cuello / cervicales

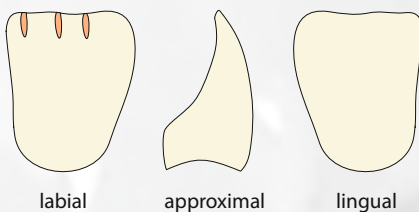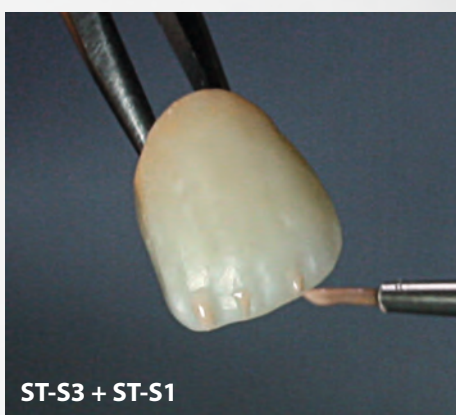



Mammelon

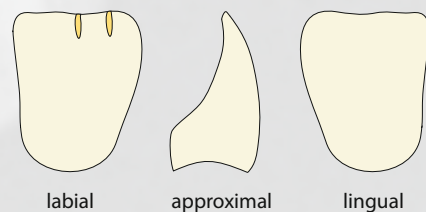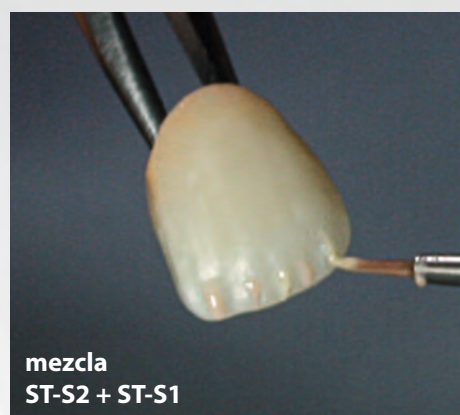


Mammelon brillante

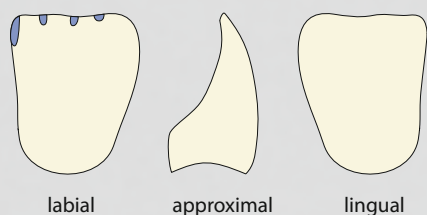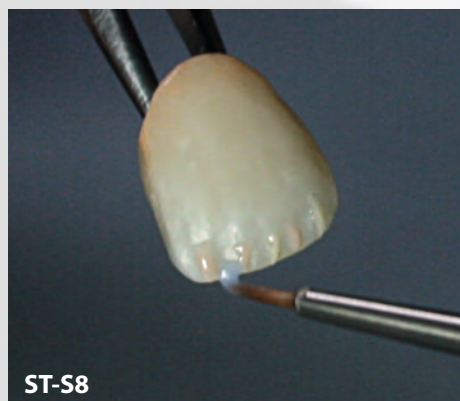


entre Mammelon + mesial

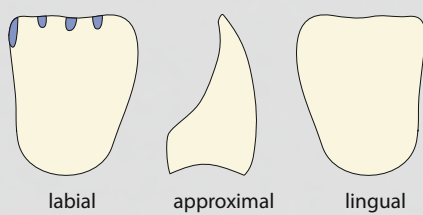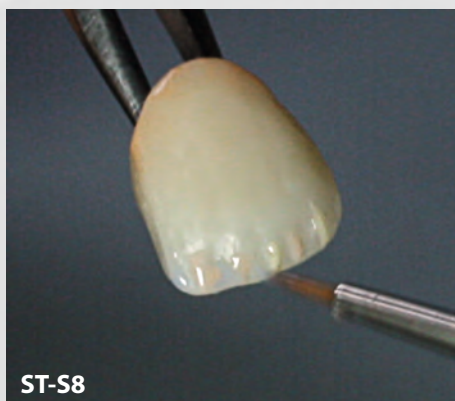

entre Mammelon + mesial


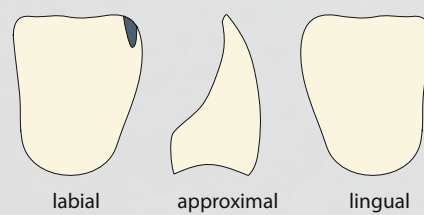


entre Mammelon + distal

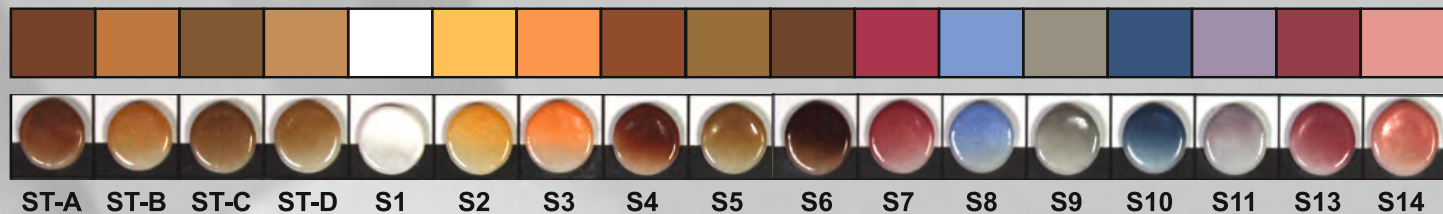


K2 MyStain Tintes + K2 MyStain Estructura



1. primera coloración

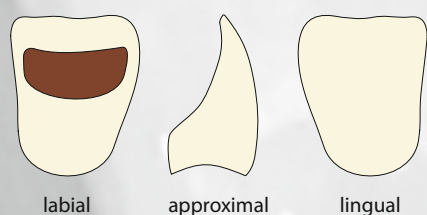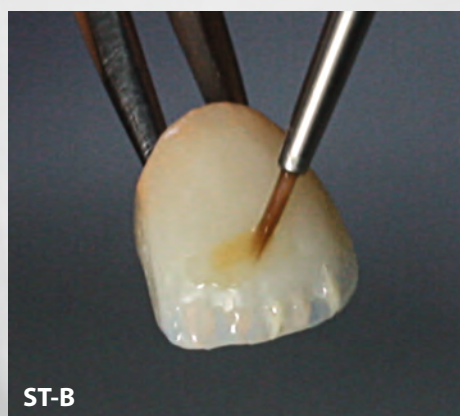



dentina, labial

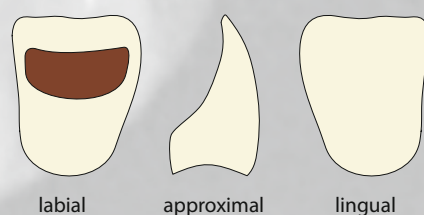


dentina, labial

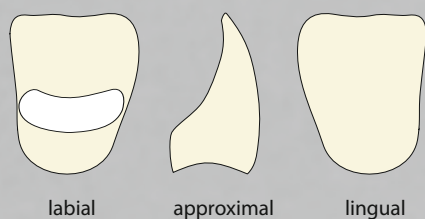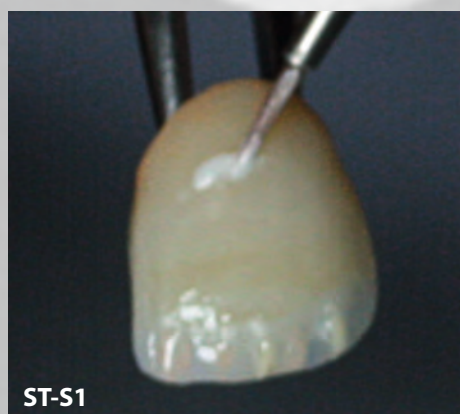

blanqueamiento labial

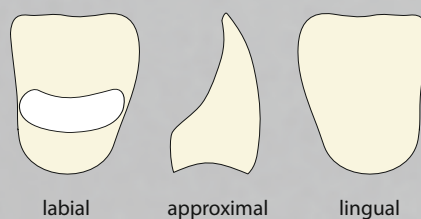
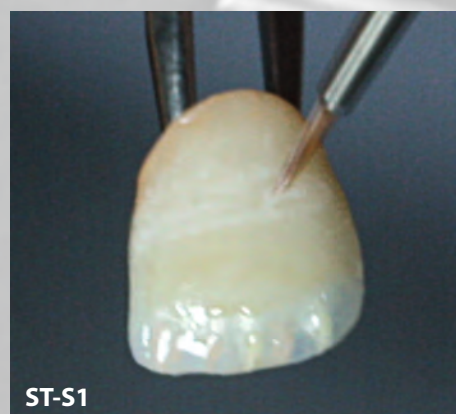


blanqueamiento labial


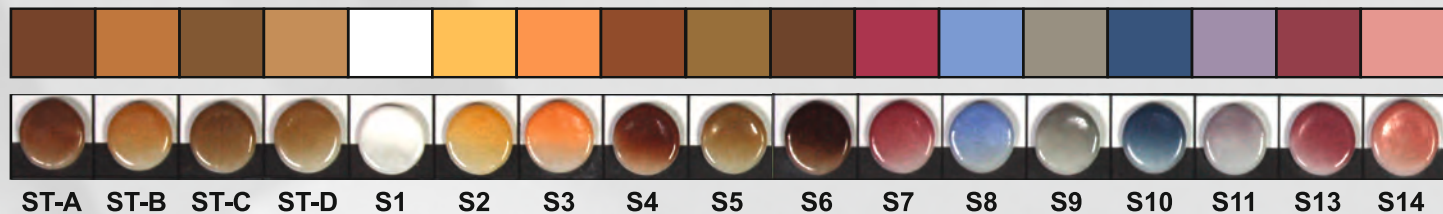


K2 MyStain Tintes + K2 MyStain Estructura


1. primera coloración

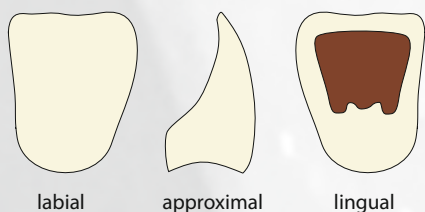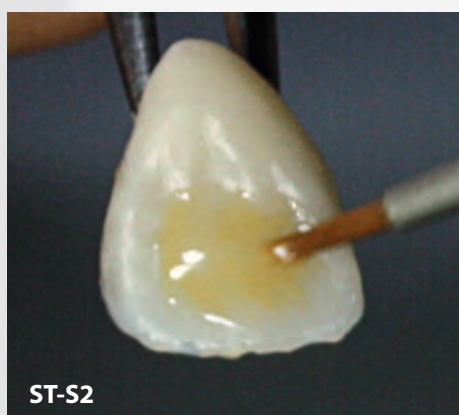


lingual

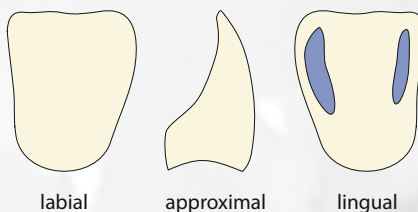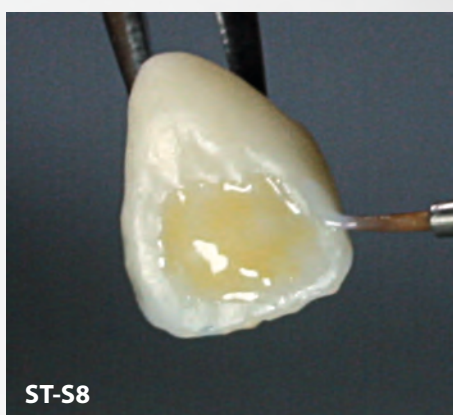


lingual (incisal + aproximal)

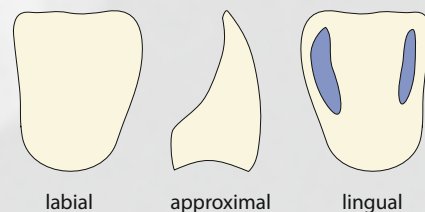



lingual (incisal + aproximal)

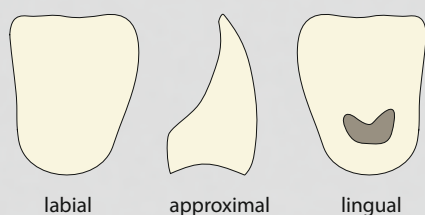


joroba ligual

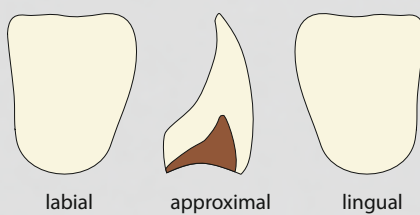

approximal

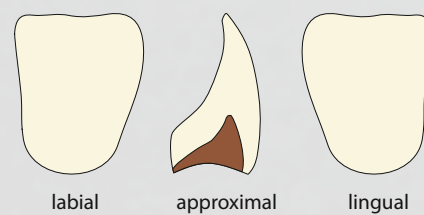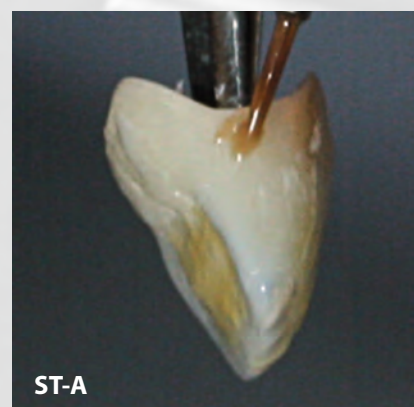


approximal

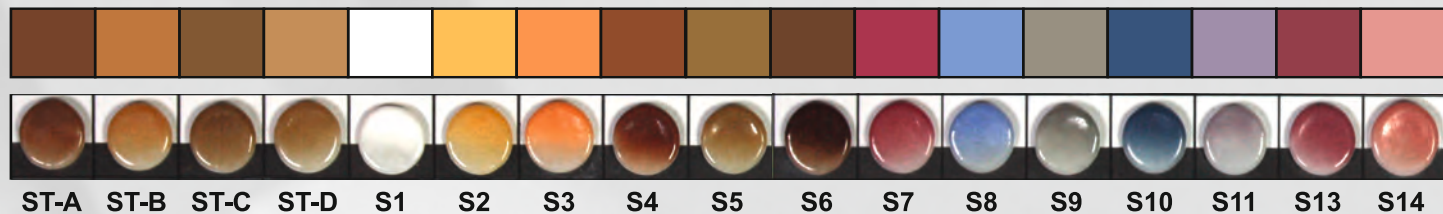

K2 MyStain Tintes + K2 MyStain Estructura



después del primer cocción




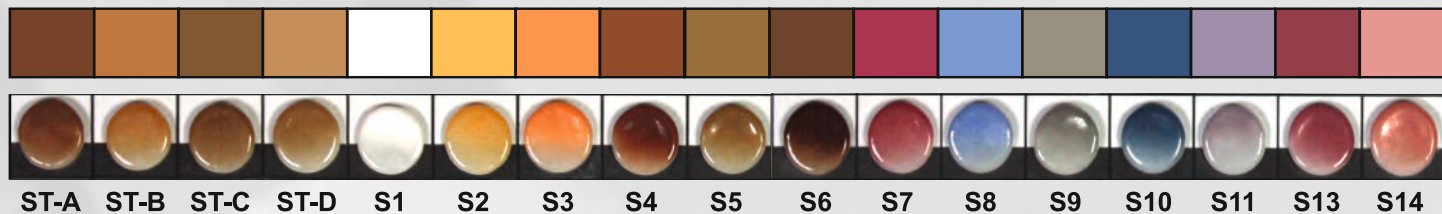


K2 MyStain Tintes + K2 MyStain Estructura


2. antes de la segunda cocción

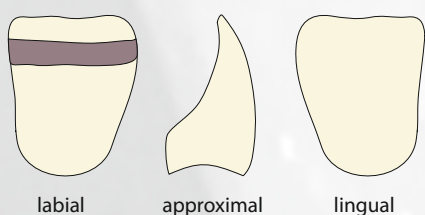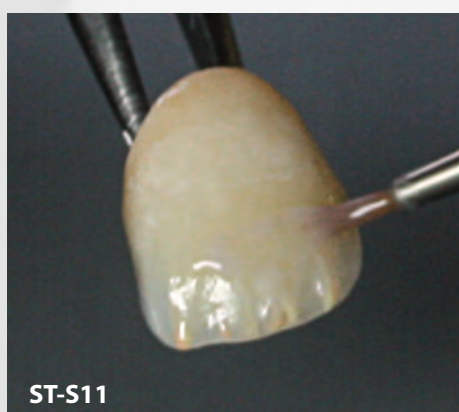



zona labial superior

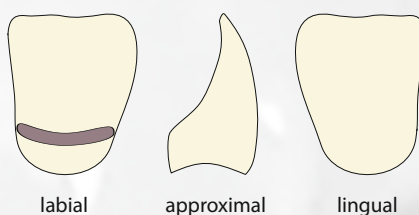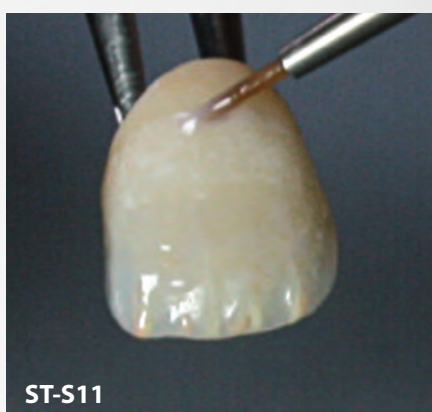


ligeramente por encima de las cervicales

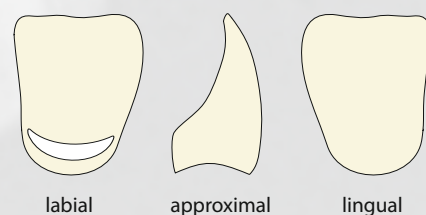


cervical

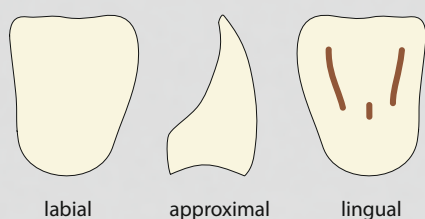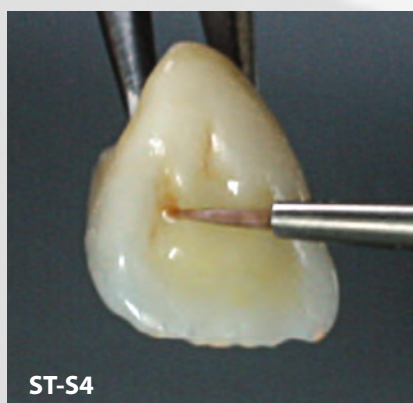


cavidades linguales

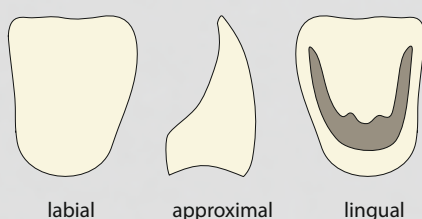

crestas linguales aproximales del esmalte + singulum



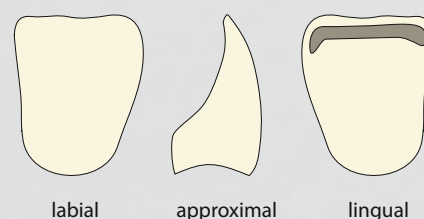


lingual incisal

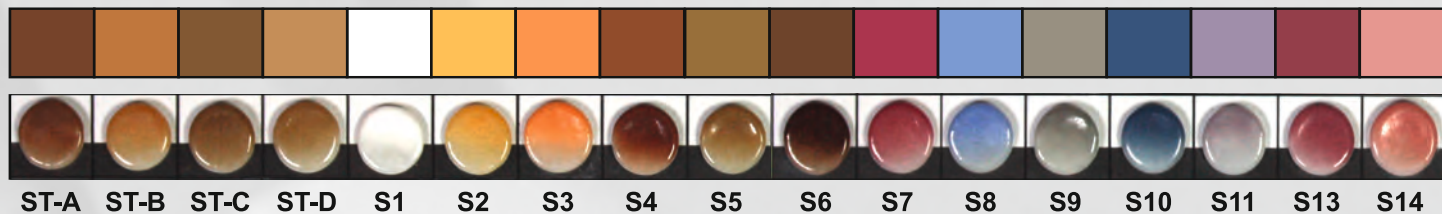


K2 MyStain Tintes + K2 MyStain Estructura


2. antes de la segunda cocción

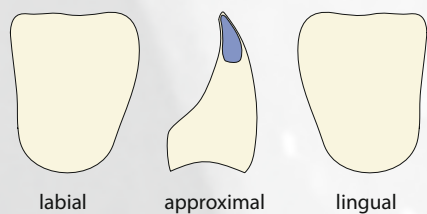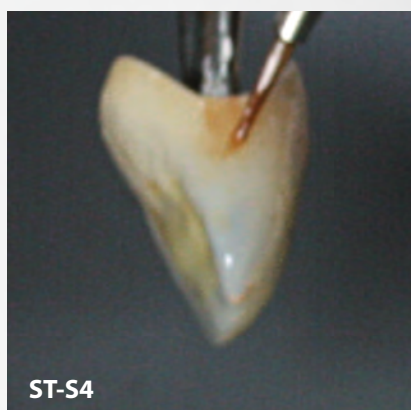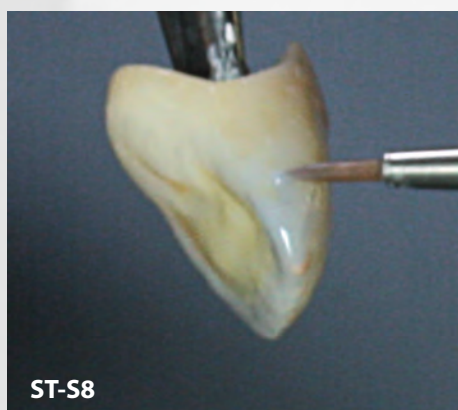


approximal - azul incisal

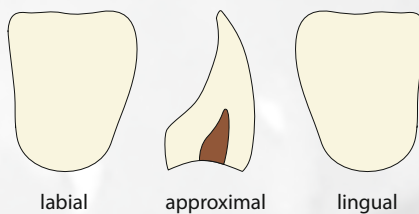

proximal - cervical

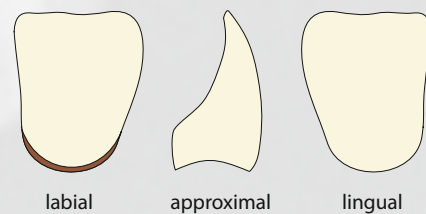



cervical

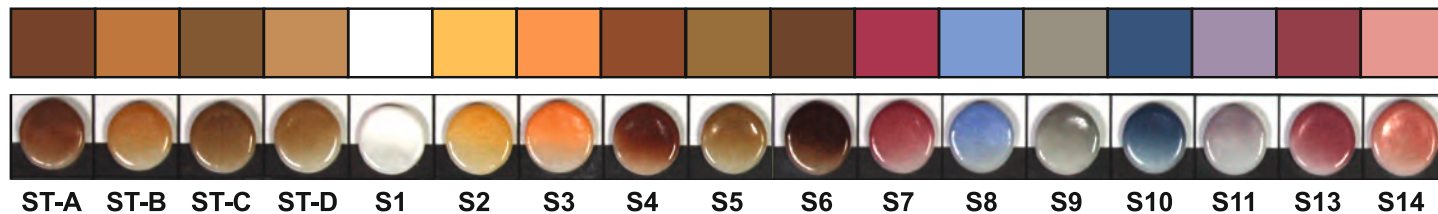

K2 MyStain Tintes + K2 MyStain Estructura


tras la segunda cocción

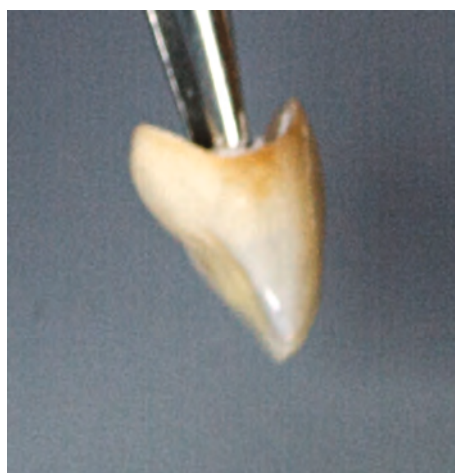

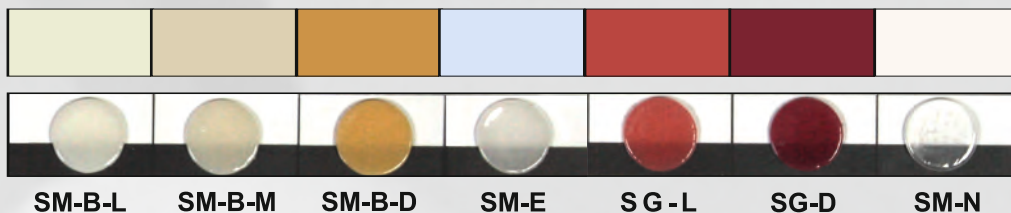


K2 MyStain Tintes + K2 MyStain Estructura


3. Estructura

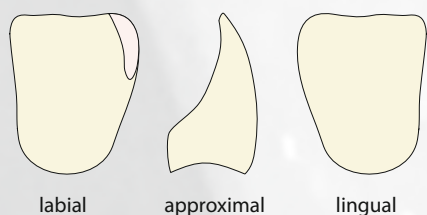


labial, mesial, distal

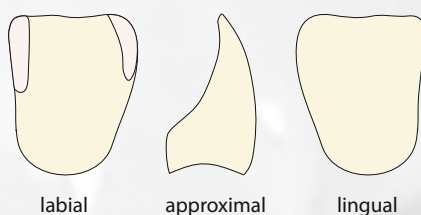


labial, mesial, distal

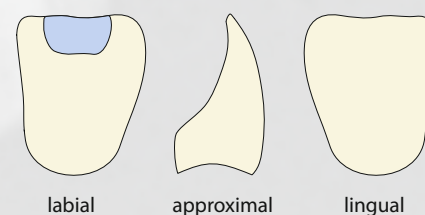


centro del cuerpo a incisal

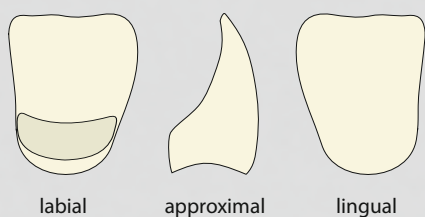

cervical


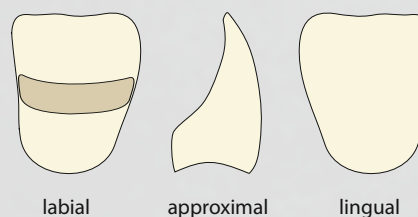


Cuerpo

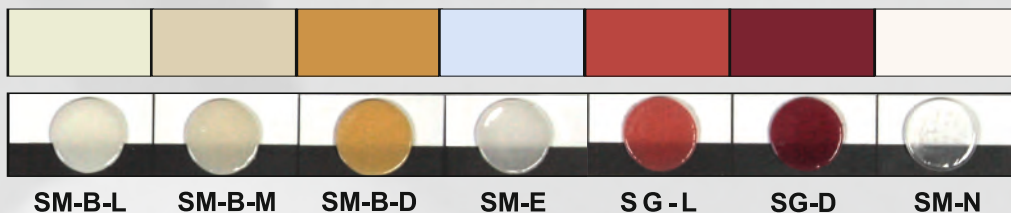


K2 MyStain Tintes + K2 MyStain Estructura


3. Estructura

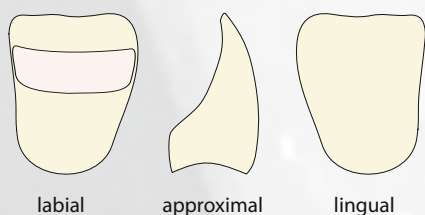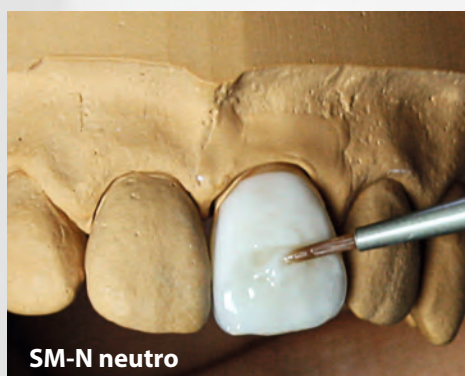


central / cuerpo

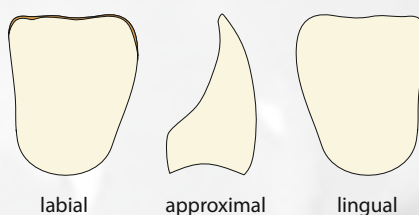


intermedio seco a continuación,
la estructura de la superficie

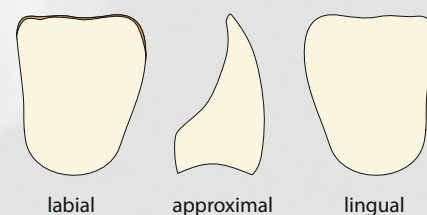


incisal

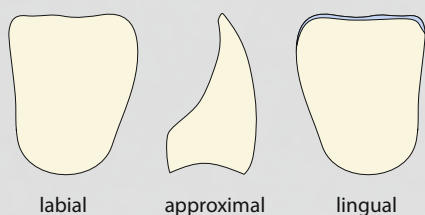

lingual incisal

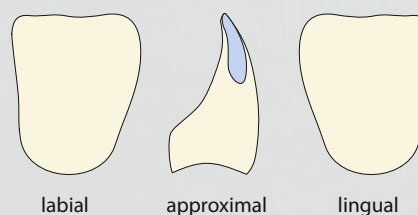

aproximal (puntos de contacto
máx. 0,3-0,4 mm sin carga)

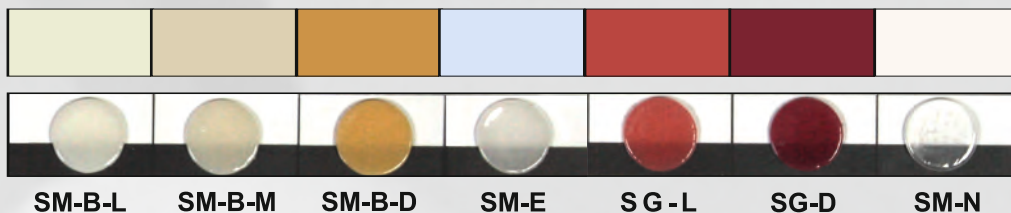

K2 MyStain Tintes + K2 MyStain Estructura



3. Estructura - tras la segunda cocción






K2 MyStain Tintes + K2 MyStain Estructura


4. antes de la cocción de glaseado

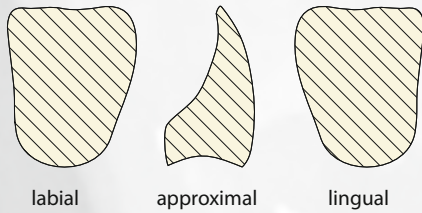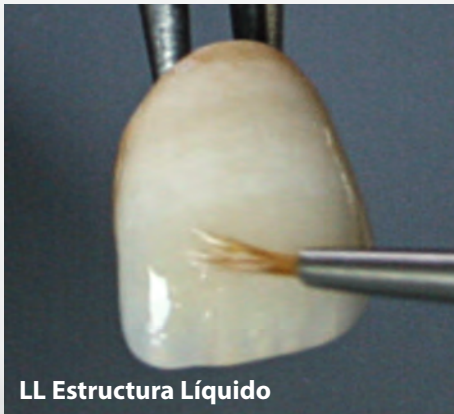


todo redondo con Structure Liquid

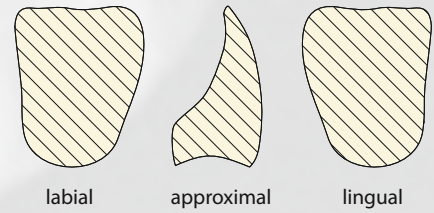



todo alrededor con compuesto GL

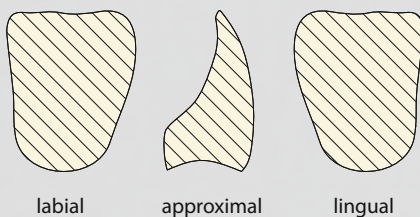

todo alrededor con compuesto GL

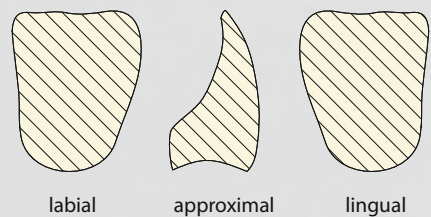



Estructura de la superficie de diseño

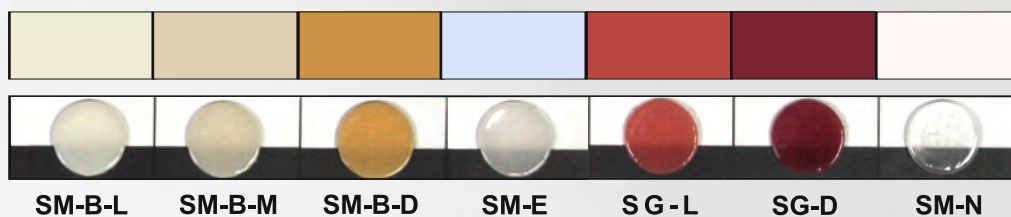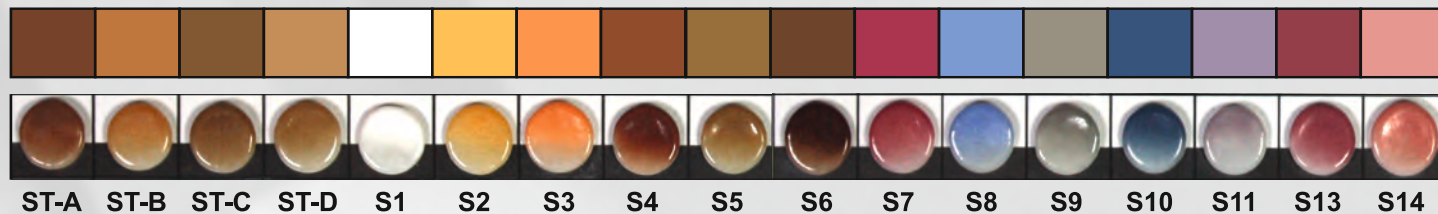

K2 MyStain Tintes + K2 MyStain Estructura


Acabado tras la cocción de glaseado





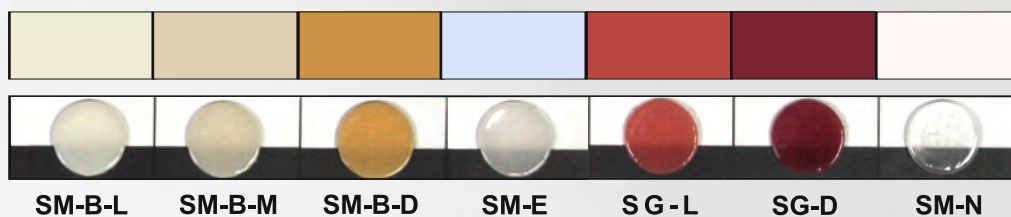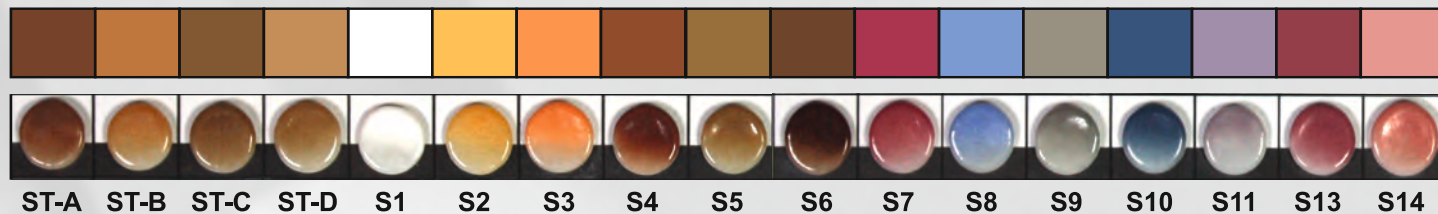

K2 MyStain Tintes + K2 MyStain Estructura

Acabado tras la cocción de glaseado

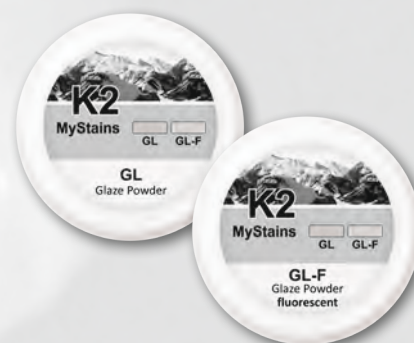

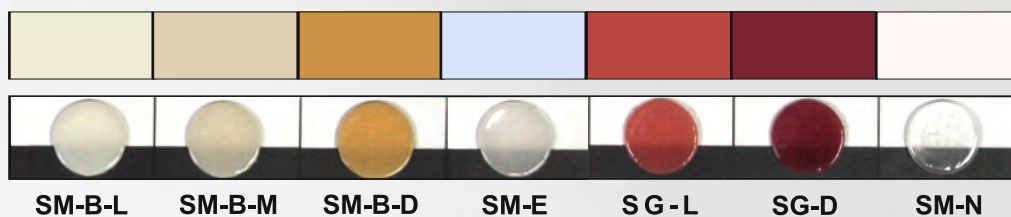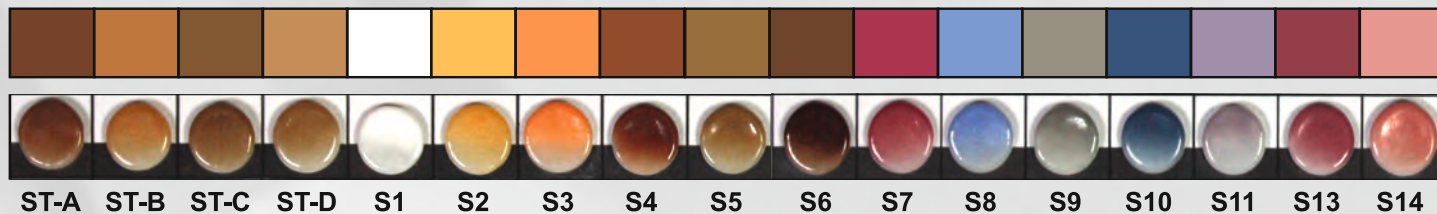

K2 MyStain Tintes + K2 MyStain Estructura

Acabado tras la cocción de glaseado



Mesas de cocción




Mesa de cocción para K2 MyStains - cocción de glaseado/mancha para todas las cerámicas enumeradas a continuación, así como para la zirconia sinterizada pura (piezas brutas) y el disilicato de litio monolítico (prensado)

	Temperatura inicial	Secado	Temperatura de subida	Temperatura final	Tiempo de espera	Vacío	Apariencia
Cerámica de baja fusión (K2 LF)	480°C / 896°F	4 minutos	45°C/min / 113°F/min	750°C - 770°C / 1382°F - 1418°F	1 minuto	Sí	brillante
Cerámica de alta fusión (K2 HF)	480°C / 896°F	4 minutos	45°C/min / 113°F/min	860°C - 880°C / 1580°F - 1616°F	1 minuto	Sí	brillante
Cerámica de litio (K2 Li)	450°C / 842°F	4 minutos	45°C/min / 113°F/min	750°C - 780°C / 1382°F - 1436°F	1 minuto	Sí	brillante
Zirconcerámica (K2 Zi)	480°C / 896°F	4 minutos	45°C/min / 113°F/min	790°C - 810°C / 1454°F - 1490°F	1 minuto	Sí	brillante
Zirconio Dióxido (en blanco)	450°C / 842°F	6 minutos	45°C/min / 113°F/min	800°C - 950°C / 1472°F - 1742°F	1 minuto	Sí	brillante
Disilicato de litio (bloques)	450°C / 842°F	4 minutos	45°C/min / 113°F/min	730°C - 780°C / 1346°F - 1436°F	1 minuto	Sí	brillante

Los parámetros de cocción especificados anteriormente son valores orientativos que deben adaptarse siempre al horno utilizado y debe adaptarse a la situación del horno. El resultado de cocción correcto es crucial.

Si se fresa a partir de CAD/CAM azul, termine de cristalizar antes de esmaltar.

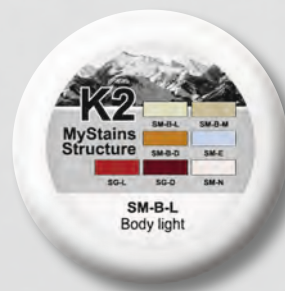

Mesa de cocción para K2 MyStains Estructura sobre dióxido de circonio

Precalentamiento	Tiempo de secado	Hora de cierre	Tasa de ascenso	Vacío	Temperatura de cocción	Tiempo de espera	A largo plazo refrigeración
430°C / 806°F	3 min*	3 min*	40°C/min / 104°F	100%	805°C / 1481°F	1 minuto	0 - 6 min**


Mesa de cocción para K2 MyStains Estructura sobre disilicato de litio

430°C / 806°F	3 min*	3 min*	40°C/min / 104°F	100%	775°C / 1427°F	1 minuto	0 - 6 min**
---------------	--------	--------	------------------	------	----------------	----------	-------------

* con aplicación de capa de espesor máximo de 0,5mm, extender a 5min cada vez

** para restauraciones sólidas hasta 6 min de enfriamiento prolongado


Tintes K2 MyStains

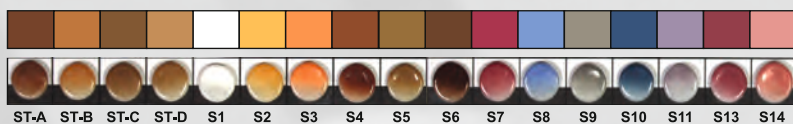

ST-A ST-B ST-C ST-D S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 S13 S14



Estructura de K2 MyStains

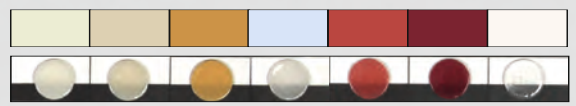

SM-B-L SM-B-M SM-B-D SM-E SG-L SG-D SM-N



Colores de pintura: K2 MyStains ...

388-0001	... ST-A, 2 g
388-0002	... ST-B, 2 g
388-0003	... ST-C, 2 g
388-0004	... ST-D, 2 g
388-0011	... ST-S1, blanco, 2 g
388-0012	... ST-S2, miel, 2 g
388-0013	... ST-S3, naranja, 2 g
388-0014	... ST-S4, beige, 2 g
388-0015	... ST-S5, caramelo, 2 g
388-0016	... ST-S6, marrón oscuro, 2 g
388-0017	... ST-S7, rojo ladrillo, 2 g
388-0018	... ST-S8, azul cielo, 2 g
388-0019	... ST-S9, gris, 2 g
388-0020	... ST-S10, azul real, 2 g
388-0022	... ST-S11, violeta ilusión, 2 g
388-0023	... ST-S13, uni rojo, 2g
388-0024	... ST-S14, uni gingiva, 2g

Compuestos de estructura: K2 MyStains ...

388-0108	... Estructura Cuerpo ligero, SM-B-L, 2 g
388-0109	... Estructura Body mediana, SM-B-M, 2 g
388-0110	... Estructura Cuerpo oscuro, SM-B-D, 2 g
388-0111	... Esmalte de estructura SM-E, 2 g
388-0112	... Estructura Gingiva light SG-L, 2 g
388-0113	... Estructura Gingiva oscura SG-D, 2 g
388-0114	... Estructura neutra SM-N, 2 g

Compuestos de glaseado / Líquido: K2 MyStains ...

388-0100	... Esmalte en polvo, GL, 10 g
388-0101	... Esmalte en polvo, GL-F (fluorescente), 10 g
388-0150	... Líquido Glaze Standard GL, 50 ml
388-1150	... Colors-Structure Líquido LL, 50 ml



Tintes K2 MyStains

Con los nuevos tintes K2 MyStains, la cerámica se puede pintar, teñir e individualizar muy bien. Si se mezclan con el Líquido de Estructura adecuado, los colores "aguantan" muy bien y el efecto deseado permanece tal como se aplicó.

Estructura K2 MyStains

puede utilizarse después de la cocción de maquillaje. Para individualizar la estructura de la superficie, puede aplicarse hasta 0,5 mm de compuesto de textura, pero sólo en las zonas no funcionales.

Sin embargo, es posible aplicar pequeños puntos de contacto.

Nota:

- Los compuestos de Structure deben mezclarse en una bandeja de mezcla de vidrio o cerámica, para que no pueda aspirarse ningún líquido.
 - Los compuestos y el líquido deben mezclarse con una espátula de ágata o cristal.
 - Todas las K2 MyStains sólo pueden mezclarse con el líquido correspondiente.
- Se prohíbe urgentemente el uso de agua

Utilización:

Los **maquillajes K2 MyStain** son adecuados para restauraciones monolíticas y todas las restauraciones correspondientes al valor CTE, carillas cerámicas de baja o alta fusión.

Los **materiales estructurales** sólo pueden utilizarse para el circonio y el disilicato de litio.





recomendada:

Pasta de cocción fija, pasta portadora de cocción

Después de la cocción de cerámica Restauraciones simplemente levántela del muñón de algodón de cocción.

- **fácil de quitar**
- sin voladuras
- o raspado necesario

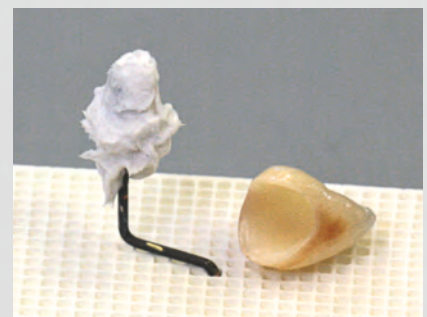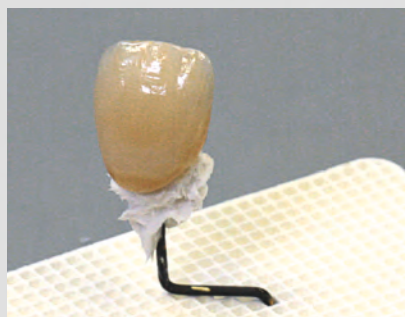

K2 MyStain Tintes + K2 MyStain Estructura

