


excellence
line

excellence
line

VARIO Magnetständer

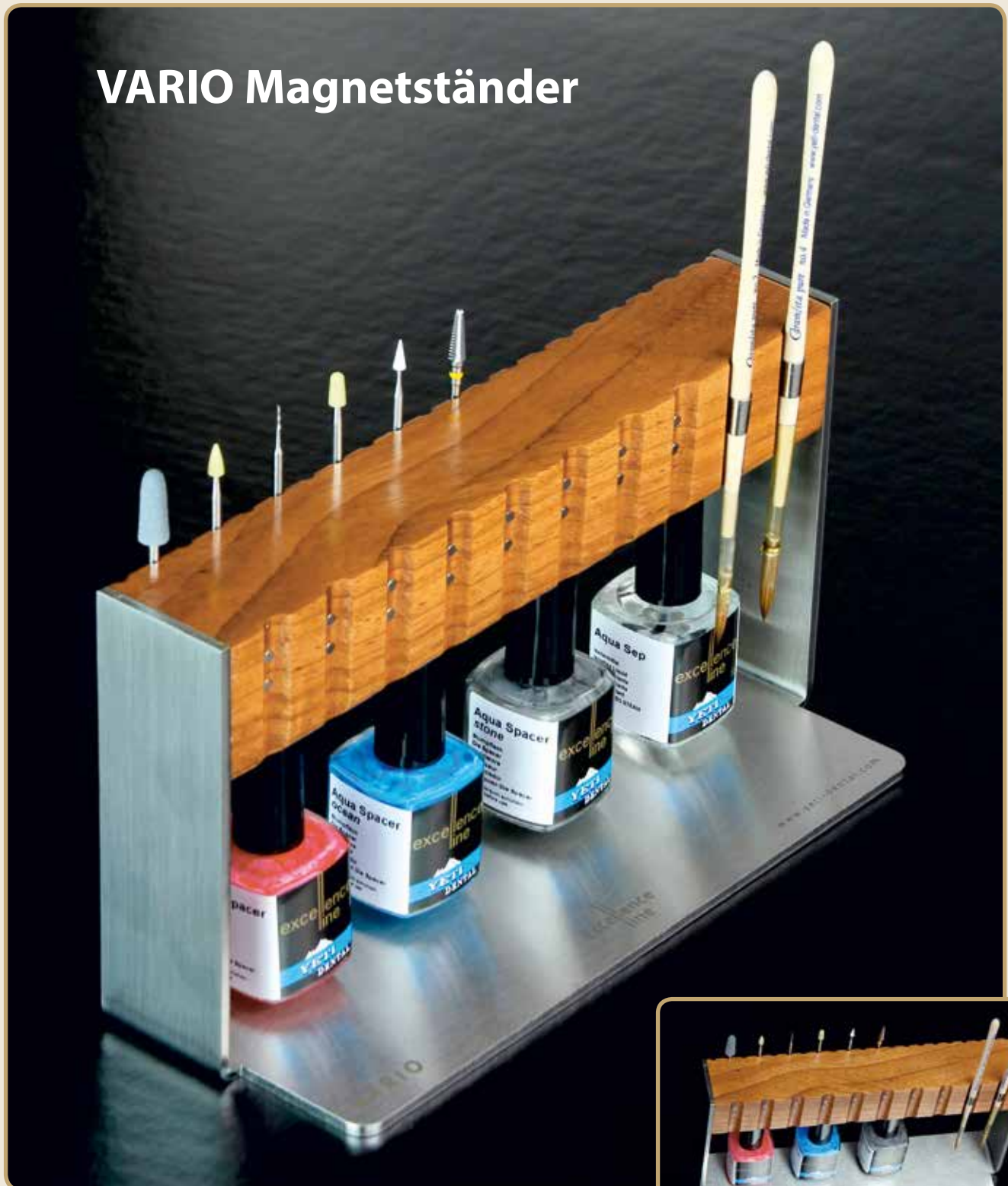

Der Vario Magnetständer - bildet das Herzstück unserer „excellence line“.

Formschön und aus edelsten Materialien gefertigt, bietet dieses Multitalent die Möglichkeit zur magnetischen Aufnahme der Produkte unserer „excellence line“.


So finden Aqua Spacer, Schleifer des Zirkonschleifset, K2 Lube und Caramista Pinsel sofort wie von Zauberhand magnetisch ihren Platz.

Ihr Arbeitsplatz bleibt stets aufgeräumt, alle Produkte sind übersichtlich angeordnet und sofort griffbereit. Dies spart Platz und Zeit.


Zusätzlich werden die hochwertigen Materialien wie z.B. Pinselspitzen durch eine hängende Lagerung geschont. So werden sie lange Freude an Ihren excellenten Produkten haben.



magnetischer Halt der „Caramista Pinsel“,
zur optimalen hängenden Lagerung
- Schonung der hochwertigen Pinselspitzen

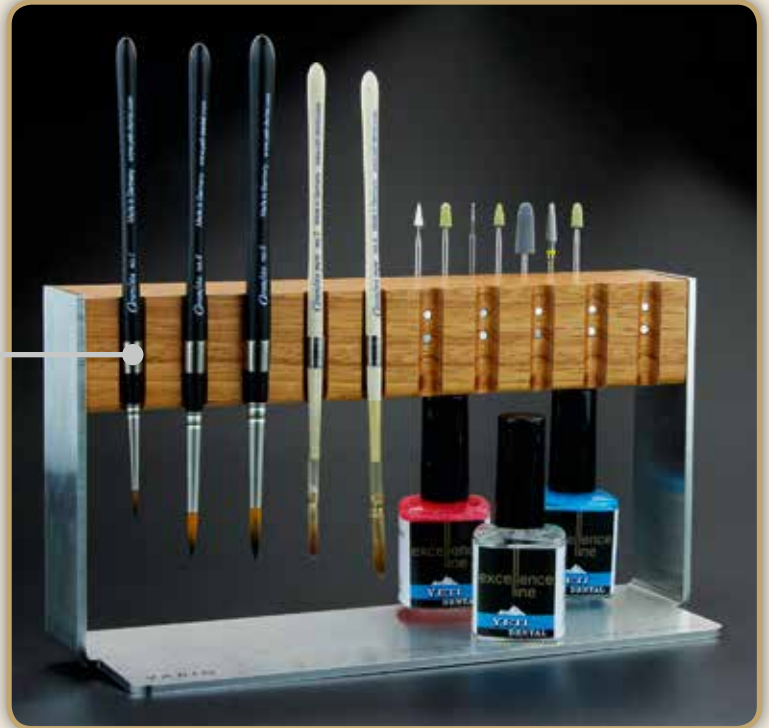

eingelassenes Magnetband
zur Fixierung der Schleifer

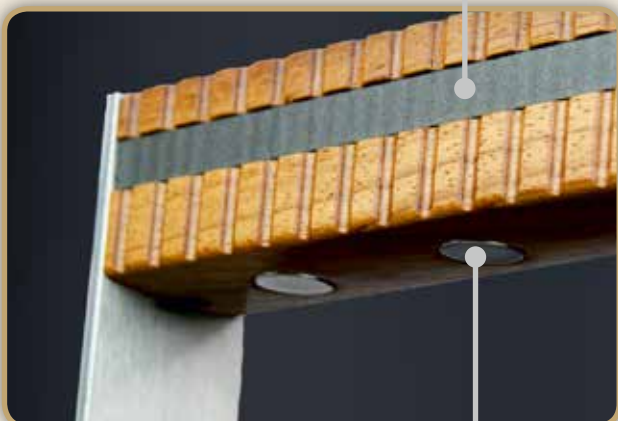

die Spacer und K2 Lube haften magnetisch
an der Unterseite des Vario Magnetständer





Aqua Spacer, 15 my

Lösungsmittelfreier Distanzlack

Sicher am Vario Magnetständer haftend,
stets aufgeräumt und griffbereit!

- auf Wasserbasis
- einfach mit destilliertem Wasser verdünnbar
- lösungsmittelfrei - daher keine lästigen Dämpfe

Nur mit Aqua Sep Isoliermittel verwenden!

Inhalt: 18 ml

Schichtauftrag: 15 my



Aqua Spacer
coral



Aqua Spacer
ocean



Aqua Spacer
stone



Aqua Sep
Isoliermittel



K2 Lube

Keramik Isolierung

Ebenfalls passend zur „excellence line“ Serie,
magnetisch am Vario Magnetständer haftend.

Diese Keramikisolierung trennt zuverlässig
Gips gegen Keramikmassen.

Verbrennt rückstandslos ohne Verfärbungen
in der Keramik zu verursachen.

Inhalt: 18ml



Caram/sta pure

Naturkielpinsel

Das exklusive Kolinsky Haar wird traditionell einzeln von Hand gebunden und im Naturkiel befestigt.

Naturhaarpinsel aus hochwertigem Kolinsky - Haar:

- ideale Spannkraft
- dichtes Haar als Wasserreservoir
- feine Pinselspitzen

Pinselgriff:

- mit Metallklemme zur magnetischen Haftung am Vario Magnetständer

In natürlicher Leinen-Pinseltasche geliefert:

- zum Schutz des Pinselhaars
- mit zusätzlichen Steckplätzen für weitere Lieblingsinstrumente

„Handmade in Germany“

Inhalt:

Set aus Caramista pure no.2 und no.4
in praktischer Pinseltasche



Alle Pinsel der Serie „Caramista“ halten magnetisch am Vario Magnetständer.

So können bis zu 10 verschiedene Pinsel sicher und stets griffbereit aufbewahrt werden.

Weitere Pinsel der Serie „Caramista“ finden Sie

in unserem Hauptkatalog oder unter: www.yeti-dental.com


Caram/sta

Caram/sta N






Schleifset zur Herstellung einer natürlichen Textur
eines Zahnes und zur Ausarbeitung von Zirkongerüsten

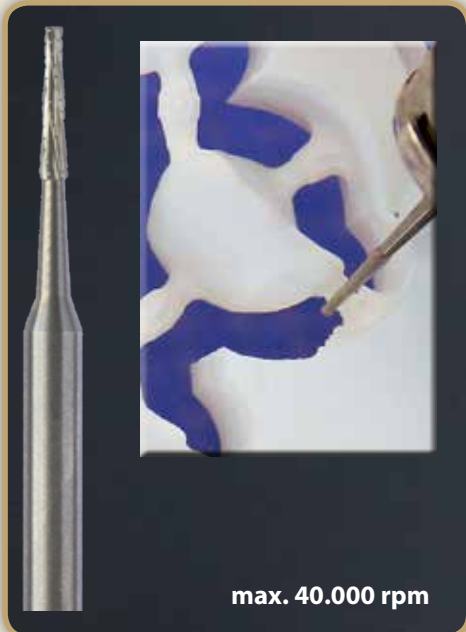

max. 40.000 rpm

HM Fissurenbohrer
zum Heraustrennen der Zirkonstruktur
aus dem Blank

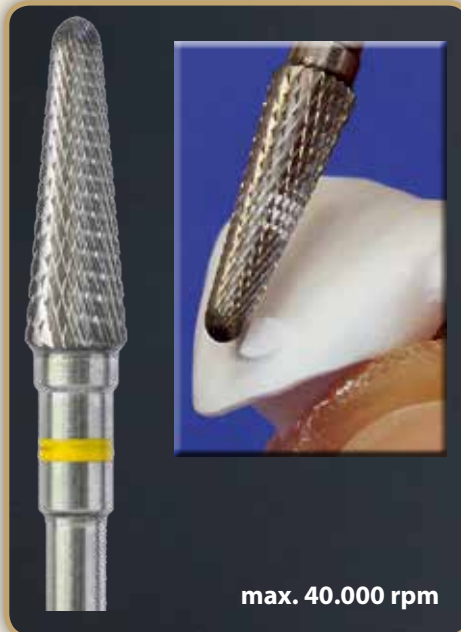

max. 40.000 rpm

HM Fräse
mit Diamantschliff extrafein,
für schnellen Materialabtrag
und sehr feines Schliffbild
(auch für Schichtkeramik geeignet)



max. 12.000 rpm

Smart Stone (2 Formen)
mit Diamantkorn für sanftes
Schleifen der Konturen
(auch für gesinterte Arbeiten geeignet)



max. 20.000 rpm

Arkansas
für Konturierung der Oberfläche
und feinste Details



max. 10.000 rpm


Schleifpapier Konus
zur Glättung der Oberfläche und
Nachempfinden der Wachstumsrillen
(Perikymatien)



max. 10.000 rpm

Rubber Flame
zur Glättung gewünschter Details,
z.B. Abrasionsflächen

Artikel		Menge / Inhalt	Artikelnummer	
	Vario Magnetständer ohne Bestückung	1 Stück	Art.-Nr. 312-9000	
	Zirkon Schleifset 1 HM Fissurenbohrer 1 HM Fräse 1 Smart Stone konus 1 Smart Stone flamme 1 Arkansas 1 Schleifpapier Konus (auf Mandrell montiert) 1 Rubber Flame	1 Set = 7 Stück	Art.-Nr. 440-0001	
Nachfüllpackungen für Zirkonschleifset		HM Fissurenbohrer	5 Stück	Art.-Nr. 440-0300
		HM Fräse	1 Stück	Art.-Nr. 440-0200
		Smart Stone konus	1 Stück	Art.-Nr. 440-0400
		Smart Stone flamme	1 Stück	Art.-Nr. 440-0500
		Arkansas	5 Stück	Art.-Nr. 440-0600
		Schleifpapier Konus (unmontiert, ohne Mandrell)	25 Stück	Art.-Nr. 440-0100
		Rubber Flame	5 Stück	Art.-Nr. 440-0700
	Aqua Spacer coral	1 x 18 ml	Art.-Nr. 597-0001	
	Aqua Spacer ocean	1 x 18 ml	Art.-Nr. 598-0001	
	Aqua Spacer stone	1 x 18 ml	Art.-Nr. 599-0001	
	Aqua Sep Isoliermittel	1 x 18 ml	Art.-Nr. 589-1001	
	Caramista pure Brush Set	2 Pinsel: 1 x no 2 1 x no 4	Art.-Nr. 314-5000	
	K2 Lube	1 x 18 ml	Art.-Nr. 345-0018	

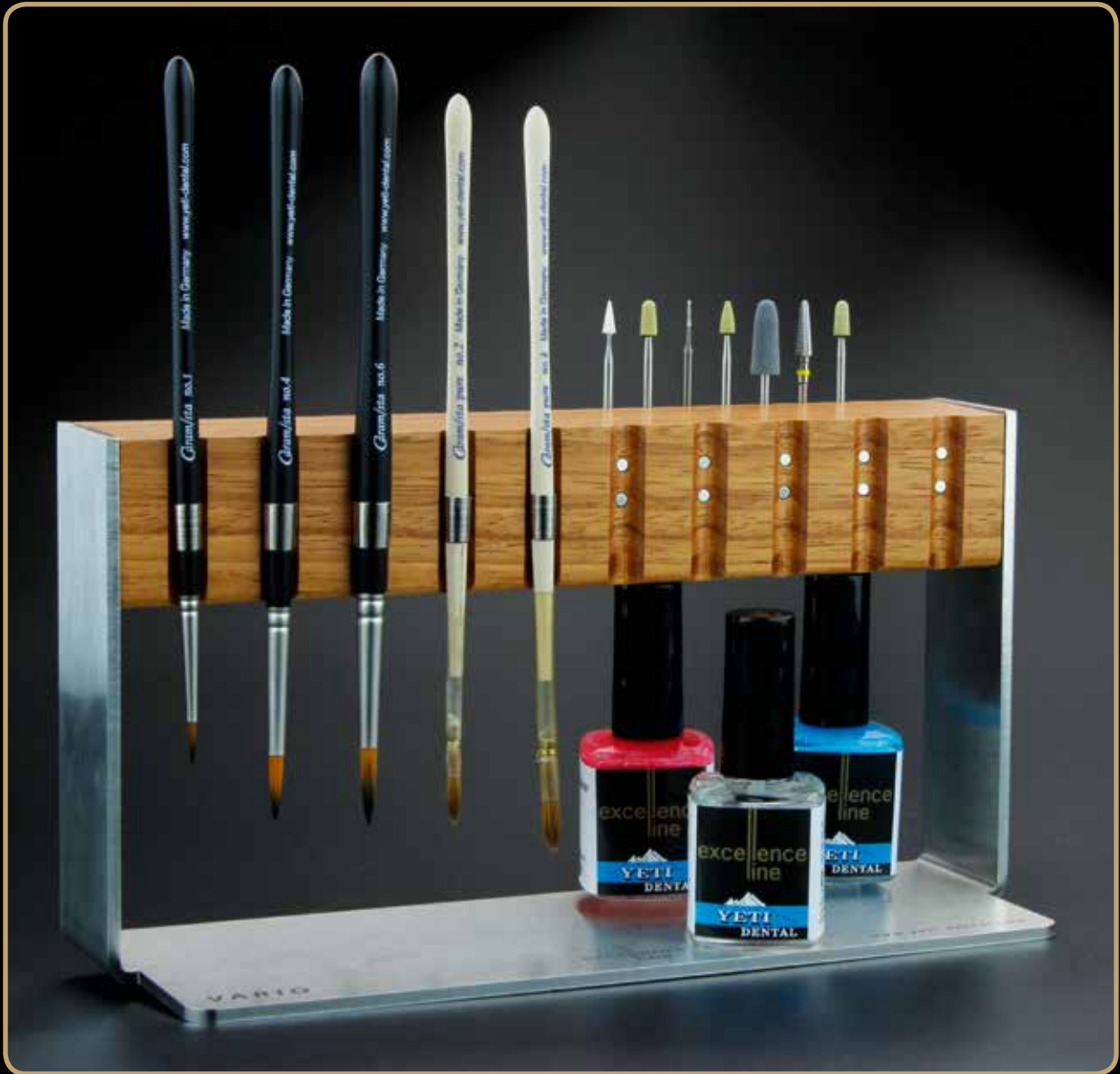

Print: BaurOffset Print e.K.

Konzept & Design: Anke Biskupski, Engen

03.2017 V1 by YETI Dental

